




Download- und Installationsanleitung Version 6.8

Download des Installationspakets.....	1
Installation auf dem Server/Netzlaufwerk für Mehrplatznutzung.....	4
Installation auf dem Server/Netzlaufwerk.....	4
Clientinstallation auf einem Arbeitsplatz.....	7
Einzelplatzinstallation.....	9
Einlesen Ihrer Lizenzdaten.....	11
Einlesen Ihrer Lizenzdaten ohne Internetanschluss.....	12
So geht es weiter.....	14


Download des Installationspakets

Im Folgenden wird der Download des Installationspakets des Dr. Lennartz Laborprogramms für Apotheken beschrieben.

Zum Download klicken Sie bitte auf den in der E-Mail enthaltenen Link oder kopieren Sie die URL in die Adress-Zeile Ihres Browsers. Wir empfehlen dafür Chrome, Firefox, Edge oder Safari.

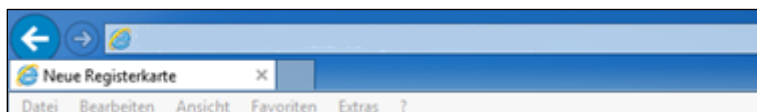


Der Download startet daraufhin automatisch.

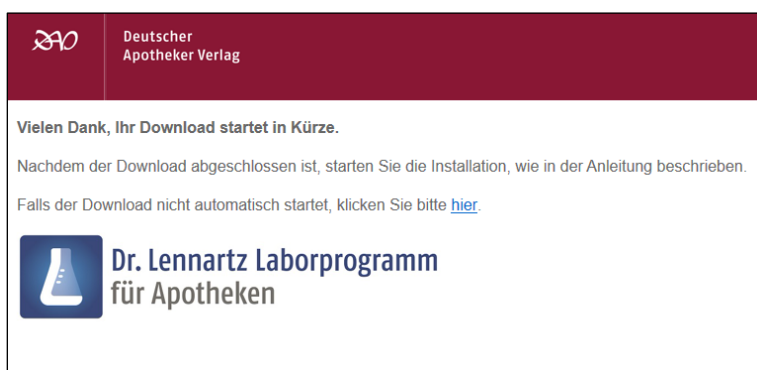


Sollte der Download nicht automatisch starten, kann er mit einem Klick auf [hier] manuell angestoßen werden.

Hinweis: Gegebenenfalls bestätigen Sie die Nachfrage Ihres Browsers zum Download und speichern Sie die Datei in Ihrem Download-Ordner.

Im sich darauf öffnenden Fenster klicken Sie auf [Speichern]. Die Installationsdatei wird somit in Ihrem Download-Ordner gespeichert.

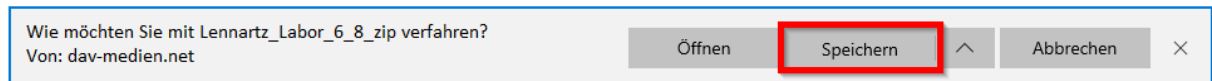


Nach einem erfolgreichen Download finden Sie die komprimierte Installationsdatei in Ihrem Download-Ordner, den Sie mit Klick auf [Öffnen] anzeigen lassen können.

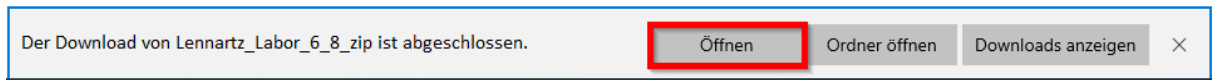


Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei, um diese zu entpacken. Doppelklicken Sie anschließend auf die Anwendung „Start“.

Im darauffolgenden Fenster klicken Sie auf [Alle extrahieren].

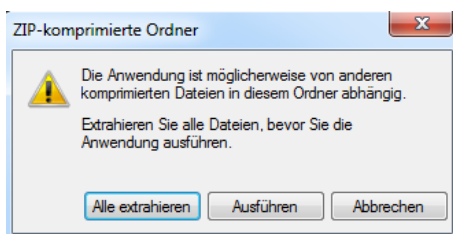


Wählen bzw. bestätigen Sie den Zielort und klicken Sie auf [Extrahieren].

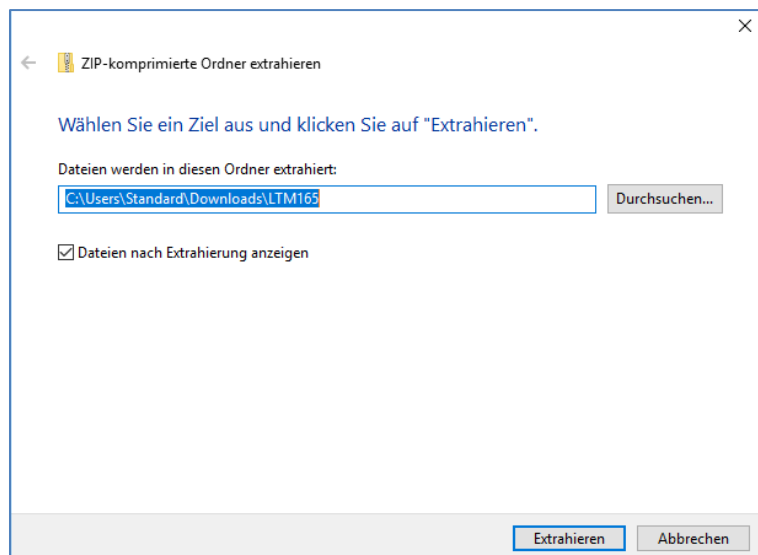

Es öffnet sich der Ordner, in den die Dateien extrahiert wurden. Bei einer Mehrplatzinstallation empfiehlt es sich, die heruntergeladenen Dateien auf einen Wechseldatenträger (z.B. USB-Stick) oder auf ein gemeinsames Netzlaufwerk zu entpacken bzw. zu kopieren. Doppelklicken Sie auf die Anwendung „Start“, um die Installation zu beginnen.

Name	Größe	Gep
Labor-Installation.Labz	151 085 630	
Start.exe	4 260 352	

Sollte der Downloadlink bereits abgelaufen sein, erscheint im Browser die folgende Meldung.

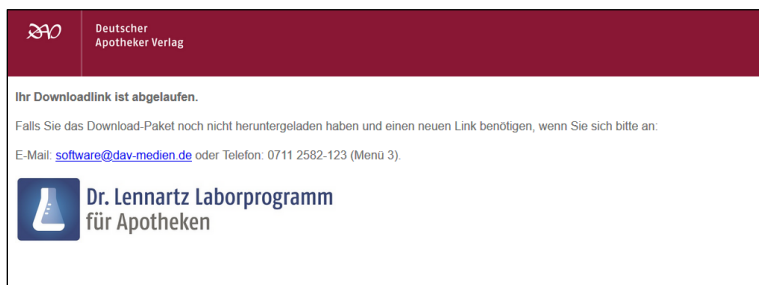

Bitte wenden Sie sich in diesem Fall erneut an die in der Meldung eingetragene E-Mail-Adresse um einen neuen Downloadlink zu erhalten.


Installation auf dem Server/Netzlaufwerk für Mehrplatznutzung

(Für die Installation auf einem einzelnen Arbeitsplatz lesen Sie bitte das Kapitel 'Einzelplatz-installation' ab Seite 9.)


Für eine Netzwerkinstallation benötigen Sie ein gemeinsames Netzlaufwerk, welches auf allen Arbeitsplätzen zur Verfügung steht und auf dem die Arbeitsplätze Schreibrechte haben. Zuerst installieren Sie von einem zukünftigen Arbeitsplatz/Client die Laborprogrammdaten auf das gemeinsame Laufwerk. Anschließend führen Sie an jedem Arbeitsplatz/Client, an dem das Programm genutzt werden soll, eine Clientinstallation durch.

Standardinstallation auf dem Server/Netzlaufwerk


Navigieren Sie zu dem Ordner in dem Sie das heruntergeladene und entpackte Installationsprogramm abgelegt haben. Klicken Sie hier doppelt auf die Anwendung „Start“.

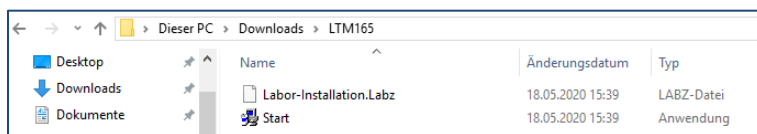

Hinweis: Unter Windows 10 klassifiziert „Windows SmartScreen“ die Installationsdatei eventuell als Risiko. Falls dies geschieht, klicken Sie auf „Weitere Informationen“.

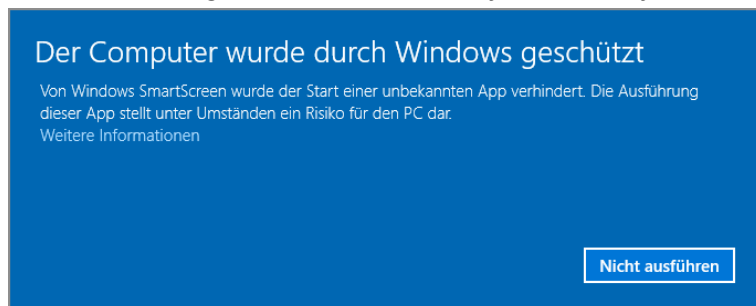


Klicken Sie anschließend auf [Trotzdem ausführen].

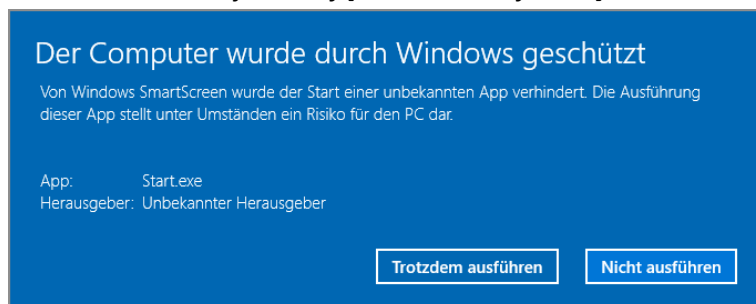

(Bei älteren Betriebssystemen kann die Meldung im Wortlaut abweichen.)




Das Installationsprogramm öffnet sich und die Installation kann durch einen Klick auf [Start der Installation Version 6.8] gestartet werden.

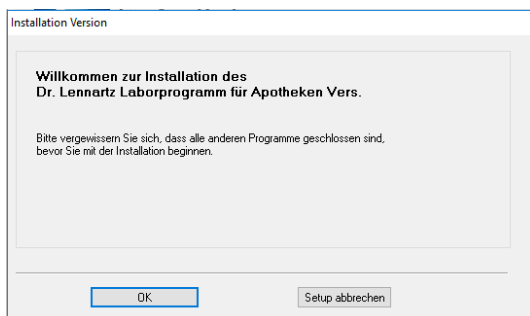


Nach der Vorbereitung des Setups erscheint das Fenster 'Willkommen zur Installation'

Klicken Sie auf [OK].

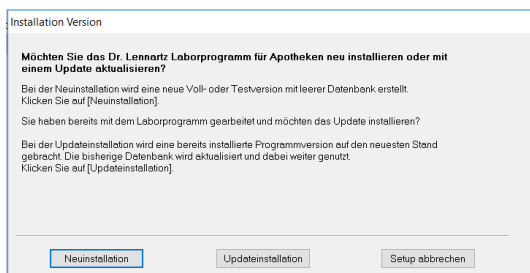


Wählen Sie in diesem Dialogfeld die Option [Neuinstallation].

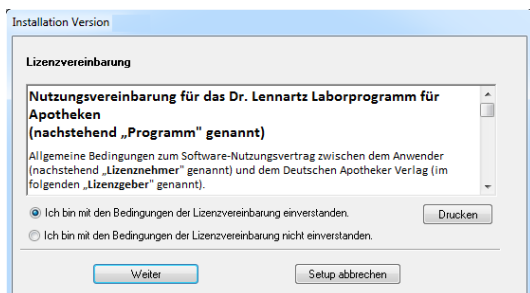


Als nächstes wird die Lizenzvereinbarung angezeigt.

Wenn Sie mit den Lizenzbedingungen einverstanden sind, wählen Sie die entsprechende Option und klicken danach auf [Weiter].

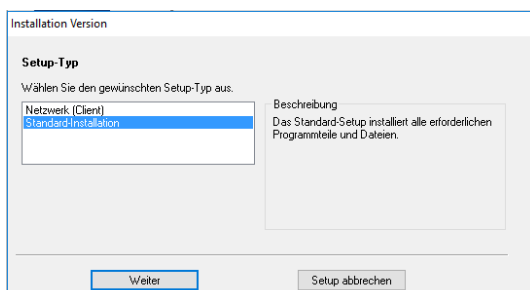


Im Fenster 'Setup-Typ' wählen Sie den Setup-Typ 'Standard-Installation' und klicken danach auf [Weiter].

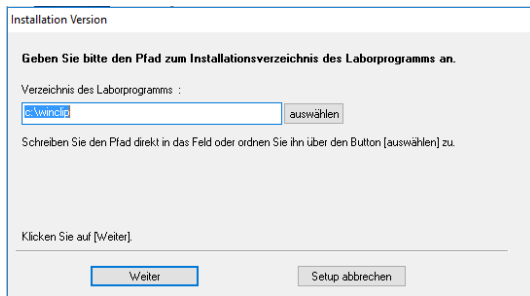

Das Installationsprogramm schlägt als Installationsziel den Ordner 'Winclip' auf Ihrer lokalen Festplatte vor.


Klicken Sie auf [auswählen] und wählen Sie im folgenden Fenster die Laufwerksbezeichnung und den Zielpfad des Netzlaufwerkes aus. Bestätigen Sie diese mit [OK].

Profitipp: Verwenden Sie den UNC-Pfad des Verzeichnisses, um bei Updates Probleme mit der UAC zu vermeiden.

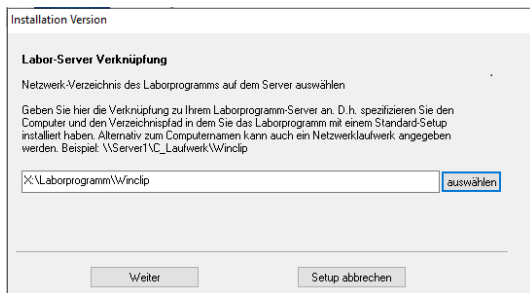

Wenn der Zielpfad korrekt angezeigt wird klicken Sie auf [Weiter].

Die Laborprogrammdaten werden in das von Ihnen gewählte Verzeichnis installiert.

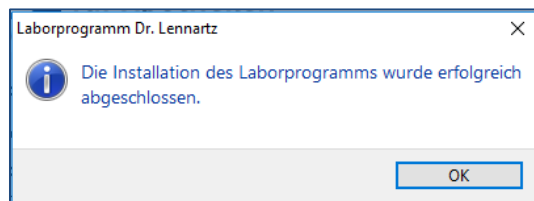

Bestätigen Sie die Erfolgsmeldung der Installation mit [OK].



Das daraufhin automatisch startende Laborprogramm beenden Sie durch Klick auf [Abbrechen].

Fahren Sie jetzt mit der Clientinstallation an allen Arbeitsplätzen fort.


Sofern der Rechner, an dem Sie soeben die Installation auf das Netzlaufwerk durchgeführt haben auch ein Laborprogramm-Client werden soll, führen Sie bitte auch hier eine Clientinstallation durch.

Clientinstallation auf einer Arbeitsstation


Führen Sie an allen Arbeitsstationen, an denen Sie mit dem Dr. Lennartz Laborprogramm für Apotheken arbeiten möchten, eine Clientinstallation durch. (Auch an dem Gerät, an dem Sie soeben die Installation auf das Netzlaufwerk durchgeführt haben.)

Hinweis für Updates: Bei Updates reicht es in der Regel aus, die Installation an einem einzigen Client durchzuführen. Die hier beschriebene ausführliche Form der Netzinstallation ist nur einmalig bei der Neuinstallation notwendig.

Gehen Sie an den gewünschten Client und beenden Sie alle anderen Programme auf Ihrem Rechner. Verbinden Sie den Wechseldatenträger (z.B. USB-Stick) auf den Sie die heruntergeladenen Dateien für die Laborprogramm-Installation kopiert haben, oder navigieren Sie zu dem Ordner in dem Sie das heruntergeladene und entpackte Installationsprogramm abgelegt haben. Klicken Sie hier doppelt auf die Anwendung „Start“.

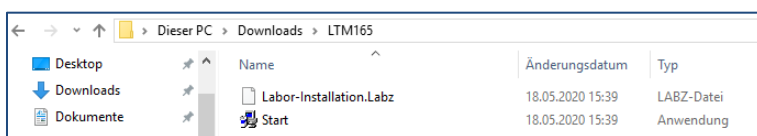


Das Installationsprogramm öffnet sich und die Installation kann durch einen Klick auf [Start der Installation Version 6.8] gestartet werden.

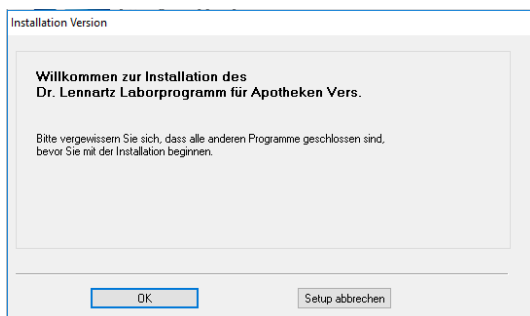


Nach der Vorbereitung des Setups erscheint das Fenster 'Willkommen zur Installation'.


Klicken Sie auf [OK].

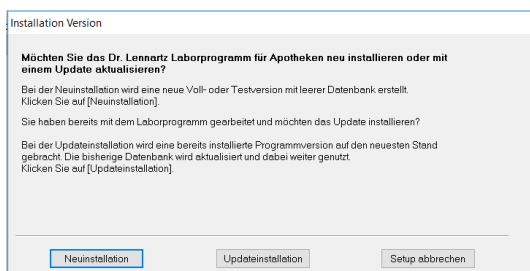

Wählen Sie in diesem Dialogfeld die Option [Neuinstallation].

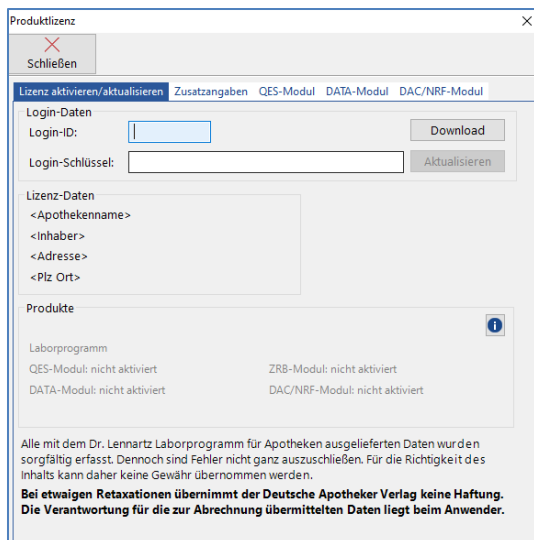


Bei der ersten Clientinstallation erfragt das Laborprogramm eventuell Ihre Produktlizenzdaten. Tragen Sie die Login-ID und den Login-Schlüssel bitte ein und klicken auf „Download“.

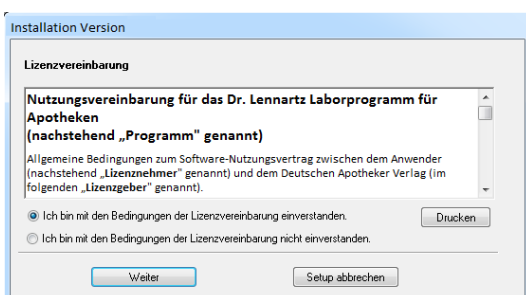

Als nächstes werden die Lizenzbedingungen angezeigt.


Wenn Sie mit den Lizenzbedingungen einverstanden sind, wählen Sie die entsprechende Option und klicken danach auf [Weiter].

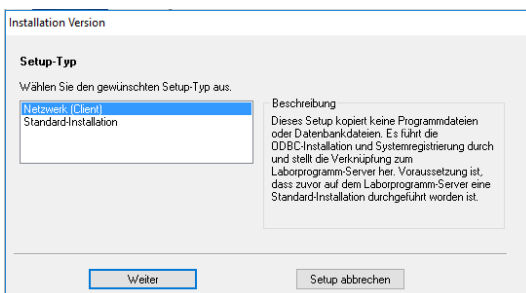


Im Fenster 'Setup-Typ' wählen Sie den Setup-Typ 'Netzwerk (Client)'.

Dadurch werden die notwendigen Systemdateien für den Client ausgewählt.

Klicken Sie danach bitte auf [Weiter].

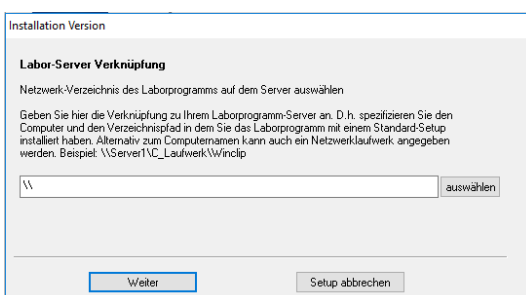

Wählen Sie nun das Laborprogramm-Verzeichnis auf dem Netzlaufwerk. Klicken Sie dazu auf [auswählen].

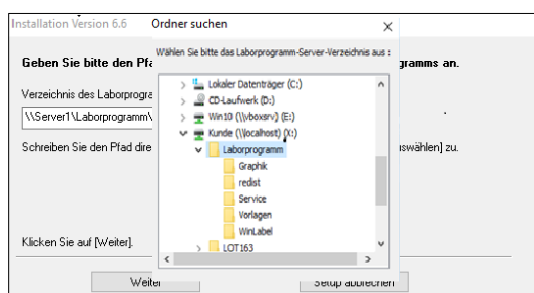



Das Fenster 'Ordner suchen' öffnet sich. Geben Sie hier das Installationsverzeichnis Ihrer zuvor durchgeführten Serverinstallation an.

In dem hier skizzierten Beispiel würde der Pfad '\\Server1\Laborprogramm\winclip' lauten. Übernehmen Sie mit [OK].

Profitipp: Verwenden Sie den UNC-Pfad des Verzeichnisses, um bei Updates Probleme mit der UAC

zu vermeiden.

Wenn der korrekte Zielpfad eingetragen ist klicken Sie auf [Weiter].

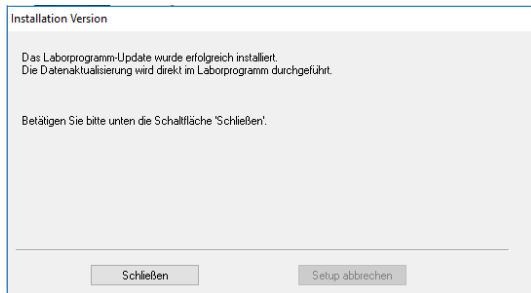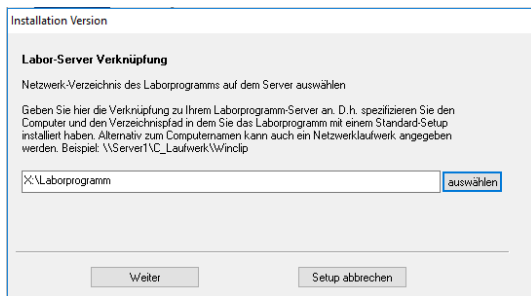

Ist die Installation abgeschlossen, erscheint dieses Dialogfenster. Klicken Sie auf [Schließen], um den Installations-Assistenten zu verlassen.

Auf Ihrem Desktop finden Sie nun das Laborprogramm-Icon, mit dem Sie das Programm zukünftig starten können.


Hinweis zum Hinzufügen weiterer Clients: Sie können das Programm jederzeit auf weiteren Arbeitsstationen des Netzwerks installieren. Führen Sie hierzu einfach auf der „neuen“ Arbeitsstation eine Clientinstallation durch. Ihre persönlichen Laborprogrammdaten befinden sich auf dem Netzlaufwerk und bleiben davon unberührt.

Einzelpplatzinstallation

Wenn Sie das Dr. Lennartz Laborprogramm für Apotheken nicht auf einem Server/Netzlaufwerk installieren möchten, ist auch eine Einzelpplatzinstallation möglich.


Beenden Sie alle noch laufenden Programme auf Ihrem Rechner.

Verbinden Sie den Wechseldatenträger (z.B. USB-Stick) auf den Sie die heruntergeladenen Dateien für die Laborprogramm-Installation kopiert haben, oder navigieren Sie zu dem Ordner in dem Sie das heruntergeladene und entpackte Installationsprogramm abgelegt haben. Klicken Sie hier doppelt auf die Anwendung „Start“.

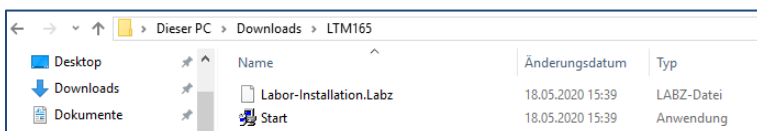




Das Installationsprogramm öffnet sich und die Installation kann durch einen Klick auf [Start der Installation Version 6.8] gestartet werden.

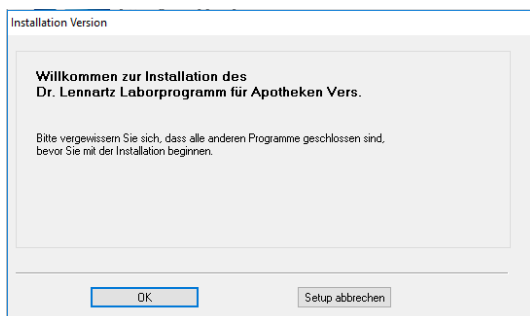


Nach der Vorbereitung des Setups erscheint das Fenster 'Willkommen zur Installation'.

Klicken Sie auf [OK].

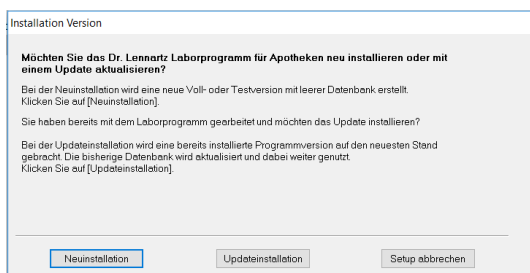


Wählen Sie in diesem Dialogfeld die Option [Neuinstallation].

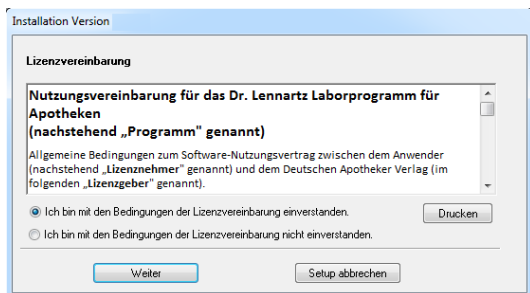


Als nächstes wird die Lizenzvereinbarung angezeigt.

Wenn Sie mit den Lizenzbedingungen einverstanden sind, wählen Sie die entsprechende Option und klicken danach auf [Weiter].

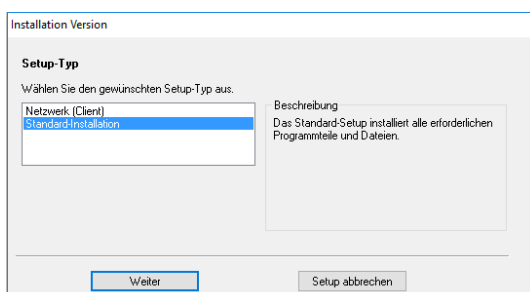


Im Fenster 'Setup-Typ' wählen Sie den Setup-Typ 'Standard-Installation' und klicken danach auf [Weiter].

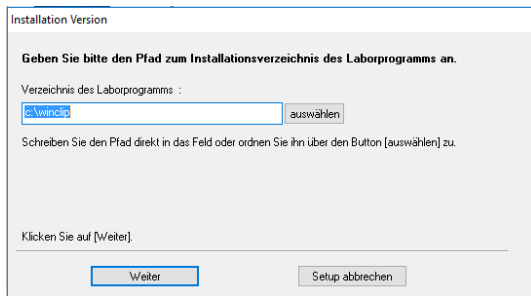

Das Installationsprogramm schlägt als Installationsziel den Ordner 'Winclip' auf Ihrer lokalen Festplatte vor. Es wird empfohlen, diesen Pfad beizubehalten.

Bei Bedarf können Sie mit [auswählen] ein anderes Verzeichnis auswählen. Achten Sie darauf, dass alle lokalen Benutzer des Rechners Schreibrechte auf dieses Verzeichnis haben.

Bestätigen Sie den Pfad mit [Weiter].

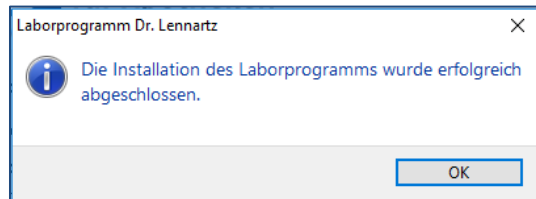

Bestätigen Sie die Erfolgsmeldung der Installation mit [OK].



Das Laborprogramm startet daraufhin automatisch. Fahren Sie jetzt mit dem nächsten Punkt „Einlesen der Lizenzdaten“ fort.

Einlesen Ihrer Lizenzdaten

Zum Einlesen Ihrer Lizenzdaten ist ein Internetanschluss notwendig. Sollte es nicht möglich sein, Ihren Laborprogramm-PC an das Internet anzuschließen, so folgen Sie bitte der Beschreibung im Unterkapitel 'Einlesen Ihrer Lizenzdaten am Einzelplatz ohne Internetanschluss' (siehe Folgeseite).



Starten Sie das Programm durch Doppelklick auf das Desktop-Icon. Alternativ ist der Start auch über 'Start | Programme | Deutscher Apotheker Verlag | Laborprogramm | Laborprogramm' möglich.

Das erste Fenster enthält allgemeine Informationen zum Versionsstand und zum Urheber- und Nutzungsrecht. Bestätigen Sie diese mit Klick auf [Starten]. Das Fenster schließt sich.

Produktlizenz

Schließen

Lizenz aktivieren/aktualisieren Zusatzangaben QES-Modul DATA-Modul DAC/NRF-Modul

Login-Daten
 Login-ID: Download
 Login-Schlüssel: Aktualisieren

Lizenz-Daten
 <Apothekenname>
 <Inhaber>
 <Adresse>
 <Plz Ort>

Produkte
 Laborprogramm
 QES-Modul: nicht aktiviert ZRB-Modul: nicht aktiviert
 DATA-Modul: nicht aktiviert DAC/NRF-Modul: nicht aktiviert

Alle mit dem Dr. Lennartz Laborprogramm für Apotheken ausgelieferten Daten wurden sorgfältig erfasst. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Für die Richtigkeit des Inhalts kann daher keine Gewähr übernommen werden.
Bei etwaigen Retaxationen übernimmt der Deutsche Apotheker Verlag keine Haftung. Die Verantwortung für die zur Abrechnung übermittelten Daten liegt beim Anwender.

Es öffnet sich das Fenster 'Produktlizenz'.

Tragen Sie Ihre Login-ID und Ihren persönlichen Login-Schlüssel in die beiden gleichnamigen Felder ein und klicken Sie auf [Download].

Dass die Lizenzdaten erfolgreich eingelesen wurden, erkennen Sie an der Anzeige Ihrer Apotheken-Adresse im mittleren Fensterbereich. Im unteren Fensterbereich sind Ihre freigeschalteten Produkte sichtbar.

Überprüfen Sie die Angaben.

Produktlizenz

Schließen

Lizenz aktivieren/aktualisieren Zusatzangaben QES-Modul DATA-Modul DAC/NRF-Modul

Telefon-Nummer
 Fax-Nummer
 Apothekenleiter(in) Übernehmen

Wechseln Sie in das zweite Register 'Zusatzangaben' und überprüfen oder ergänzen Sie dort Ihre Telefon- und Faxnummer.

Sofern der Apothekenleiter Ihrer Apotheke nicht der Inhaber ist, kann in das Feld 'Apothekenleiter(in)' ein zusätzlicher Name eingetragen werden. Dieser wird dann in den Adresskopf aller mit dem Programm erstellten Protokolle aufgenommen.

Sind alle Angaben korrekt, klicken Sie auf [Übernehmen] und schließen danach das Fenster.

Nun ist Ihr Dr. Lennartz Laborprogramm freigeschaltet. Bei einer Netzwerkinstallation reicht es, die Produktlizenz an einem der Netzwerk-Rechner einzulesen. Das Programm kann dann an allen Clients verwendet werden.


Das Fenster 'Produktlizenz' kann bei Bedarf jederzeit über den Hauptmenüeintrag 'Datei | Produktlizenz' geöffnet werden.

Einlesen Ihrer Lizenzdaten ohne Internetanschluss


Sollte es nicht möglich sein, Ihren Laborprogramm-PC an das Internet anzuschließen, muss die Lizenzdatei an einem anderen PC mit Internet-Anschluss heruntergeladen werden. Halten Sie dazu einen USB-Stick bereit.

Öffnen Sie das Produktlizenz-Fenster über 'Datei | Produktlizenz' und tragen Sie Ihre Login-ID und den Login-Schlüssel in die beiden gleichnamigen Felder ein. Klicken Sie auf [Download].

Es öffnet sich ein Hinweisenfenster, das die fehlende Internetverbindung feststellt. Es wird vorgeschlagen, die Produktlizenz an einem anderen PC herunterzuladen. Bestätigen Sie dies mit [Ja].

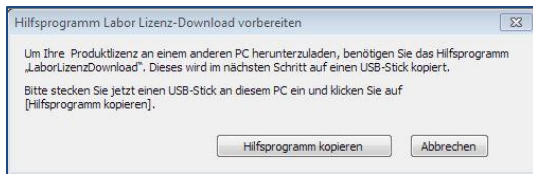


Im nächsten Schritt wird ein Hilfsprogramm auf Ihren USB-Stick kopiert. Stecken Sie den USB-Stick ein und klicken Sie auf [Hilfsprogramm kopieren]

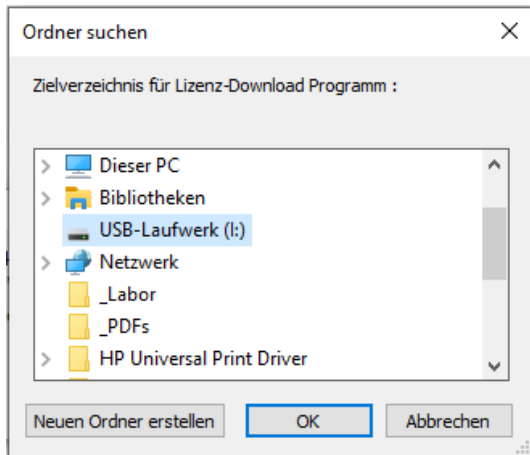

Wählen Sie im Folgefenster den Dateipfad des USB-Sticks aus und klicken Sie auf [OK].


Bitte verwenden Sie keine Unterordner!

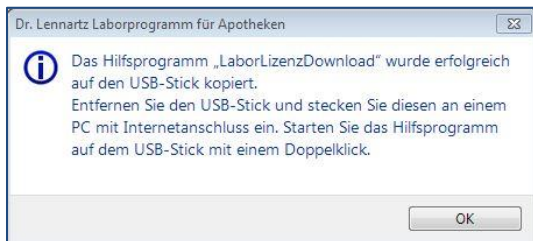

Das erfolgreiche Kopieren des Hilfsprogramms auf den USB-Stick wird durch das nebenstehende Fenster bestätigt.


Klicken Sie auf [OK] und schließen Sie das Laborprogramm.

Entfernen Sie den USB-Stick und **stecken Sie ihn an einem PC mit Internet-Anschluss ein**. Lassen Sie sich dort den Inhalt des USB-Sticks anzeigen.

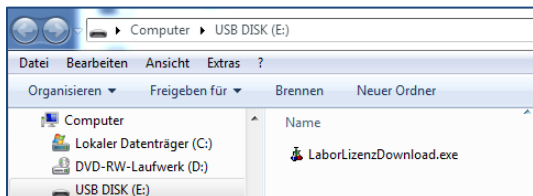

Klicken Sie doppelt auf 'LaborLizenzDownload.exe'.

Es öffnet sich das Hilfsprogramm 'Labor Lizenz-Download'.

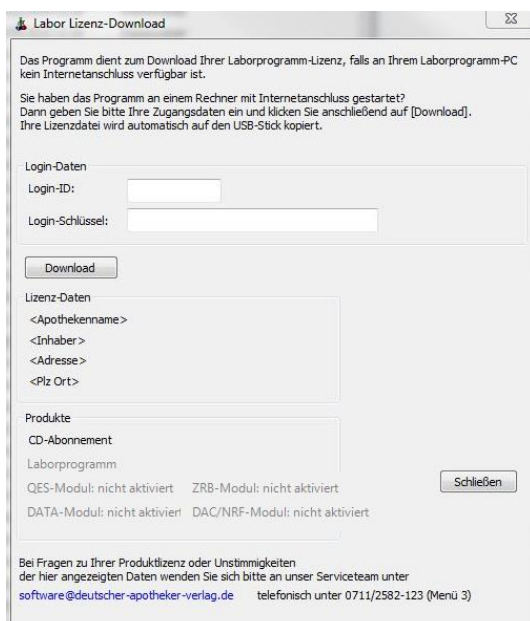


Geben Sie hier erneut Ihre Login-ID und Ihren Login-Schlüssel in die beiden gleichnamigen Felder ein und klicken Sie auf [Download].

Nach erfolgreichem Download werden Ihre Apotheken-Daten im mittleren Fensterbereich angezeigt. Im unteren Fensterbereich sind Ihre freigeschalteten Produkte sichtbar.

Überprüfen Sie die Angaben.


Entfernen Sie den USB-Stick wieder **und stecken Sie ihn erneut an Ihrem Laborprogramm-PC ein.**

Öffnen Sie das Laborprogramm. Es erscheint automatisch die folgende Meldung:

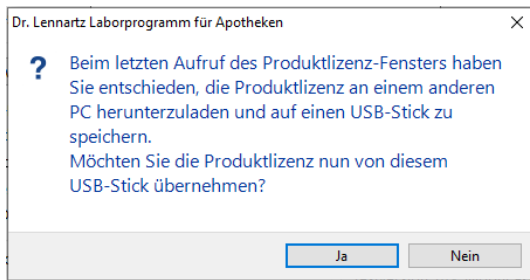

Bestätigen Sie mit [Ja].

Im nächsten Fenster wird das Verzeichnis angezeigt, in dem die Lizenzdatei gefunden wurde. Handelt es sich um den richtigen Pfad (Ihren USB-Stick), bestätigen Sie erneut mit [Ja]. Daraufhin werden Ihre Lizenzdaten in das Laborprogramm eingelesen.

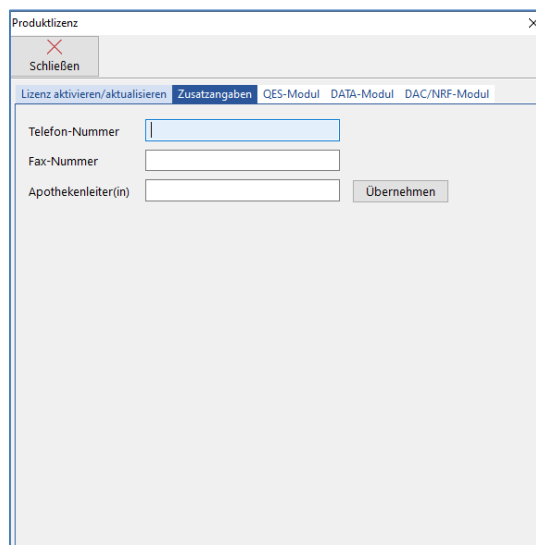

Wechseln Sie in das zweite Register 'Zusatzangaben' und überprüfen oder ergänzen Sie dort Ihre Telefon- und Faxnummer.

Sofern der Apothekenleiter Ihrer Apotheke nicht der Inhaber ist, kann in das Feld 'Apothekenleiter(in)' ein zusätzlicher Name eingetragen werden. Dieser wird dann in den Adresskopf aller Protokolle aufgenommen.

Sind alle Angaben korrekt, klicken Sie auf [Übernehmen] und schließen danach das Fenster.

So geht es weiter

Nutzen Sie das Laborprogramm ohne weitere Zusatzmodule? Dann ist die Installation abgeschlossen und Sie können sofort mit dem Programm arbeiten.

Um sich mit dem Dr. Lennartz Laborprogramm für Apotheken vertraut zu machen, finden Sie auf der Startseite der **Programmhilfe** viele Informationen zum **Einstieg für neue Anwender**. Starten Sie die Programmhilfe über Datei | Programmhilfe oder über die Taste F1.

Wenn Sie das **ZRB-Modul** zum Dr. Lennartz Laborprogramm für Apotheken beziehen, ist dieses durch Einlesen Ihrer Lizenzdatei automatisch freigeschaltet und kann sofort verwendet werden.

Wenn Sie das **QES-Modul** (nur in Kombination mit einer Nutzungslizenz möglich) erworben haben, müssen Sie vor der erstmaligen Nutzung Ihr Kartenlesegerät anbinden und die Signatur-Software installieren. Dies ist ausführlich in den Begleitunterlagen zu Ihrem QES-Starter-Kit erläutert.

Das **DAC/NRF-Modul** können Sie freischalten, wenn Sie DAC/NRF-Abonnent sind. Wechseln Sie dazu im Produktlizenz-Fenster (über 'Datei | Produktlizenz') auf das Register 'DAC/NRF-Modul' und folgen Sie den dort beschriebenen Schritten.